

Bipolare Multifunktionspinzette

steril · 12er Pack · schnell · unblutig · sauber




Die bipolare Multifunktionspinzette gehört zum optionalen Zubehör und ist eine spezielle Entwicklung der Firma Micromed zur **Entfernung von Stielwarzen und Fibroma Pendulans**. Sie kann an alle elektrochirurgischen Geräte mit bipolarer Funktion angeschlossen werden.

Bei der Entfernung der Fibroma Pendulans und der Stielwarzen ist keine chirurgische Naht notwendig. Die Behandlung ist unblutig und es entstehen keine Narben.



Es bedarf keiner Betäubung der Hautoberfläche.

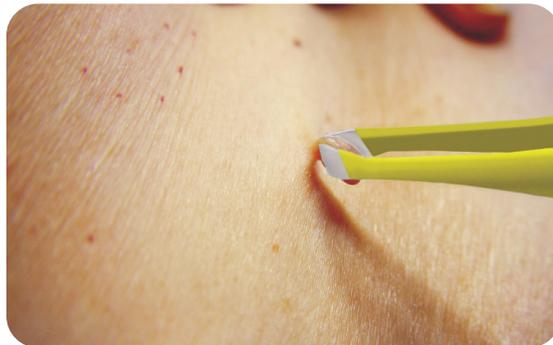


An der Basis wird das Fibroma Pendulans oder die Stielwarze mit der Pinzette erfasst und durch eine Impulsauslösung über den Fußschalter durch eine Koagulation von der Haut getrennt.



Direkt nach der Behandlung





Nach Ausheilung

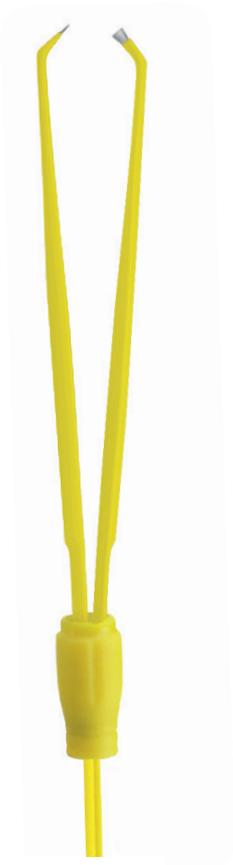

Bei dieser einfachen und schnellen Methode kommt es zu keiner Nachblutung, da alle zuführenden Gefäße koaguliert werden. Durch die sofortige Koagulation während des Schneidens kann keine viralinfizierte Ausbreitung von Viren der Stielwarze oder des Fibroma Pendulans erfolgen.

Bipolare Multifunktionspinzette

steril · 12er Pack · schnell · unblutig · sauber

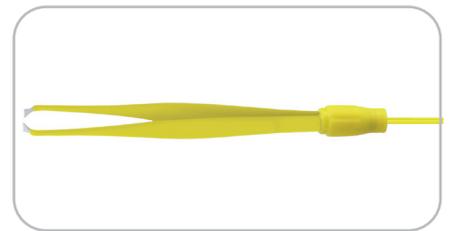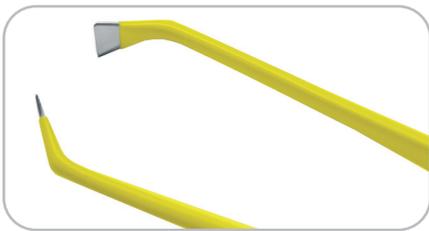

- Endseitig an den Griffteilen schließen Schnittflächen an, welche nach innen zueinander abgewinkelt sind. Somit erfolgt die Koagulation, der Schneidevorgang und die Entnahme gleichzeitig.
- Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die nach innen gebogenen Schnittflächen die Arbeitsgeschwindigkeit beschleunigt wird.
- Zudem ist eine Verletzungsgefahr im Vergleich zu einem Skalpell oder einer Elektrode für den Patienten und den Operateur wesentlich geringer.
- Einmalartikel, steril.



Bipolare Multifunktionspinzette, innengewinkelt,
Länge 130 mm, Breite 5 mm, steril, 3 m Kabel,
12er Pack, Einmalartikel

Art.-Nr. 140-115-013-YC

